

Cámara de crecimiento

Código ING-I317PF

Incubadoras Modelo I317PF (código ING-317PF):

Cámara de crecimiento vegetal, programable, con iluminación, marca INGELAB modelo I-317PF:

Gabinete con interior en ABS aislado y exterior de zinc esmaltado, con puerta de vidrio triple.

Homogeneización interna mediante circulación forzada de aire.

Sistema de enfriamiento con motocompresor y refrigerante ecológico r290.

Iluminación interna con: 3 módulos de:


Cada módulo de luz, tiene 4 barras de: (48 LEDs 3W full spectrum+16 LEDs 3W Blanco Cálido+8 LEDs 3W RL) c/u.

Intensidad a 22.5 cm 300 PAR

Relación R/RL = 1.8

Las barras distribuidas uniformemente en el espacio, logrando mayor homogeneidad en la distribución de la luz.

Altura regulable.

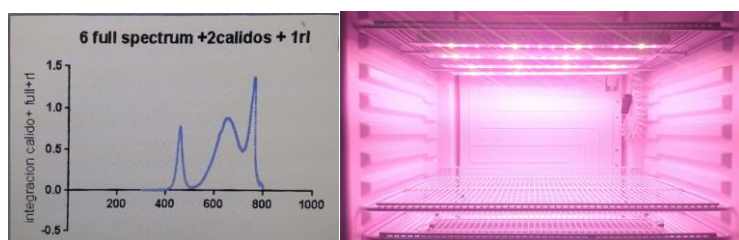

Control de temperatura con microprocesador, con lectura digital.

Rango: +5°...+50°C (c/luz apagada)

+10°...+50°C (c/luz encendida)

Resolución: 0.1°C.

Estabilidad: ±0,5°C (c/luz apagada)

±1°C (c/luz encendida)

Display LCD de 128 x 64 pixeles con retroiluminación.

Visualización de la temperatura actual y de la programada.

Menú de ajuste y programación incorporado.

Programación de hasta 4 ciclos en forma horaria, temporal y/o rampas de temperatura, junto con distintos porcentajes (0, 20, 40, 60, 80 ó 100%) de iluminación.



Cámara de crecimiento

Código ING-I317PF

Posibilidad de finalizar o reiniciar cada programa luego del último ciclo del mismo.

Almacenamiento en memoria de hasta 4 programas de hasta 4 ciclos cada uno.

Visualización gráfica del programa en curso.

Alarma por diferencias de temperatura variable respecto a la programada y por corte de energía eléctrica.

Sistema de seguridad de corte de luces por desvío de la temperatura, programable a la temperatura deseada de corte y de encendido de las luces.

Provista de dos tomas internos de 220V 50Hz.

Dimensiones Internas útiles: 114 x 44 x 42 cm,

Dimensiones externas: 180 x 55 x 58 cm.

Alimentación 220V / 50Hz.

Procedencia: Fabricación nacional

